


Pakovanje i slanje uzoraka u laboratoriju, kod bolesti slinavke i šapa


**Uzorci SiŠ-a
su infektivni
materijal.**



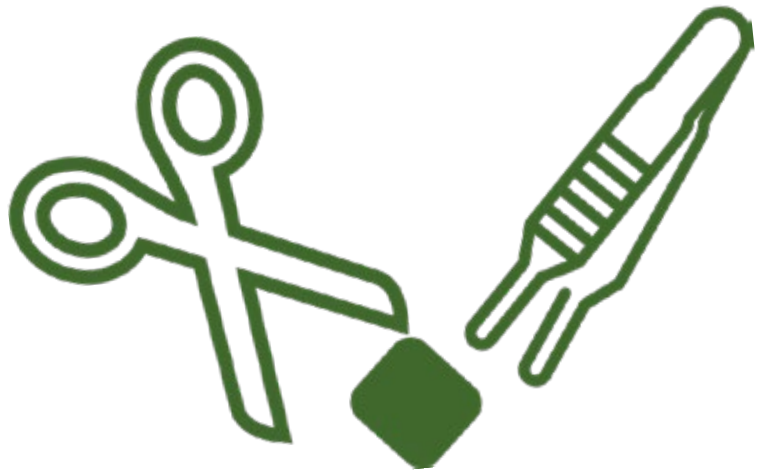

Uzorci epitela

šalju se u odgovarajućem transportnom medijumu (jednake količine glicerina i 0,04 M fosfatnog puferiranog fiziološkog rastvora pH 7,2-7,6).

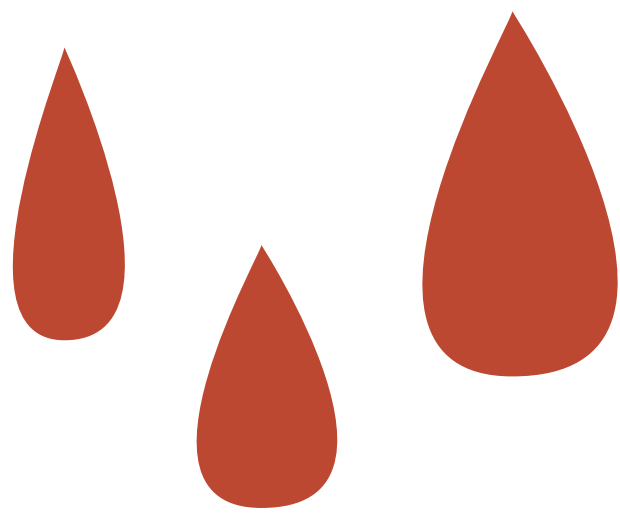

**Za serologiju su
potrebni uzorci
zgrušane krvi
(serum).**

U nekim zemljama
EDTA uzorci krvi
mogu biti potrebni i za
PCR, dok se u drugim
zemljama koriste
uzorci pune krvi.



**Uzorci uzeti probang
sondom
treba poslati u
probang transportnom
medijumu.**

Uzorci moraju biti
pravilno upakovani i
obilježeni.

Čuvati na hladnom
mjestu.

Koristite višeslojnu
ambalažu i blokove
leda.


Provjerite uputstva za
pakovanje.

Obavijestite
laboratoriju.

Dostavite
odgovarajuću
papirologiju.

Ako se radi o državi
koja je službeno
slobodna od SiŠ-
a, uzorci se moraju
hitno poslati u
laboratoriju.

Uputstva za uzoraka

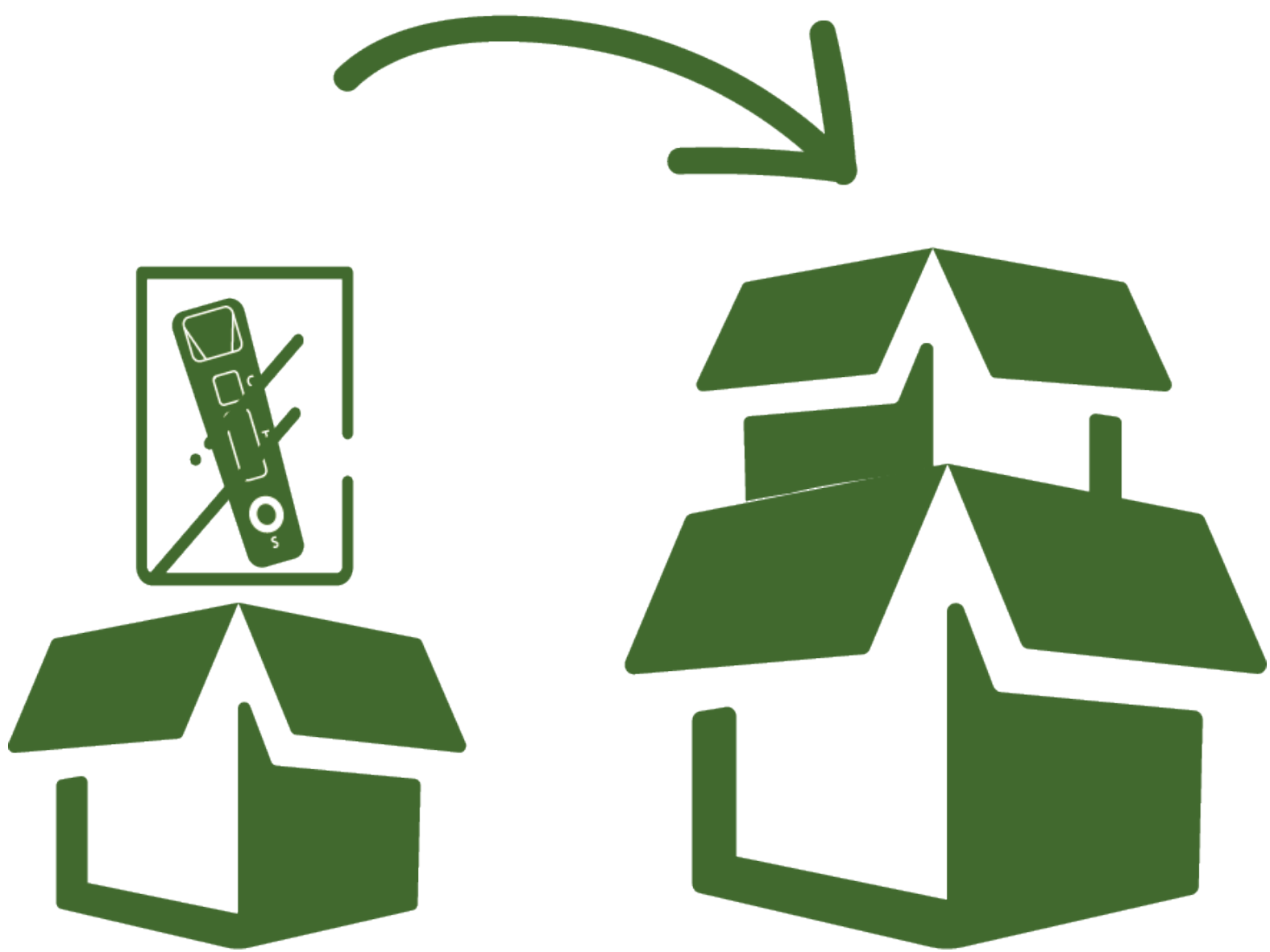

Za Evropu, osnovna uredba je Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnog materijala (ADR).

U Turskoj je relevantna uredba objavljena u Službenom listu 2019. godine.

Moraju se poštovati nacionalni propisi.

Ako ih nema, treba se pridržavati modela pravilnika UN-a, objašnjenog u Uredbi o opasnim materijalima (DGR).

Ako se uzorci transportuju vazdušnim putem, pošiljalac mora da poštuje uredbu o opasnim materijama (DGR) međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj (IATA).

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



**Funded by
the European Union**